

POSITIONING SOLUTIONS



Table of contents

Meicen	3
Meicen Barre de positionnement pour sac à vide Matière acrylique	6
Barre de verrouillage de la plaque de base pour le système Varian	7
Barre de verrouillage de la plaque de base pour le système Elekta	8
Coussin de tête Color Baseplate pour l'immobilisation en radiothérapie	9
Adaptateur de support de tête pour plaque de base Pour plaque de base de la série C	10
Coussin en fibre de carbone pour l'immobilisation en radiothérapie	11
Sacs d'aspirateur T-Shaped Meicen	12
Sac d'aspirateur en forme de S de Meicen	15
Sacs d'aspirateur rectangulaires indexés et non indexés de Meicen	17
Sacs sous vide Meicen non rectangulaires	19
Masque ouvert en forme de S Meicen Violet Imrt	21
Masque à tête ouverte en forme de S Meicen Violet Pin-Lock	22
Masque de tête en forme de S violet Meicen masque thermoplastique de radiothérapie allongé de 5 cm	23
Thermoplastiques mammaires et pelviens Meicen Violet	25
Thermoplastiques violets de type E	27
Autres types de masques	28
Masques de type V	30
Masques violets thoraciques et pelviens	31
Masques de type x-Knife	32
Masques de type P	33
Masques de type L	34
Masques de type S	35
Masques de type U	36
Conseil de poitrine Meicen MR-Supine	37
Planche de poitrine sujette Meicen	39
Plaque de base Meicen Y-Series AIO	40
Plaque de base Meicen série P pour la tête, les épaules et la poitrine	42
Plaque de base pelvienne Meicen série C	43
Plaque de base Meicen C-Series pour la tête, les épaules et la poitrine	44
Plaque de base Meicen MR C-Series AIO	46
Plaque de base pelvienne Meicen série A	47
Plaque de base Meicen A-Series tête-épaule-poitrine	48
Plaque de base AOI Meicen série A	49
Plaques de base Meicen série Y	50
Plaque de base Meicen C-Series Aio en fibre de carbone	51
Système d'immobilisation SRS	53
Système d'immobilisation SBRT	55



Guangzhou Renfu Medical Equipment Co. est un fournisseur de premier plan de solutions de positionnement et d'immobilisation de précision pour la radiothérapie, offrant une gamme complète de produits conçus pour améliorer le confort du patient et la précision du traitement. Son portefeuille comprend des masques thermoplastiques, des coussins à vide et des plaques de base en fibre de carbone, tous conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des pratiques modernes de radiothérapie.

Product offering

Meicen Barre de positionnement pour sac à vide Matière acrylique

meicen™



Barre de verrouillage de la plaque de base pour le système Varian

meicen™



Barre de verrouillage de la plaque de base pour le système Elekta

meicen™



Coussin de tête Color Baseplate pour l'immobilisation en radiothérapie

meicen™



Adaptateur de support de tête pour plaque de base Pour plaque de base de la série C

meicen™



Coussin en fibre de carbone pour l'immobilisation en radiothérapie

meicen™



Sacs d'aspirateur T-Shaped Meicen

meicen™



Sac d'aspirateur en forme de S de Meicen

meicen™



**Sacs d'aspirateur
rectangulaires
indexés et non
indexés de Meicen**



**Sacs sous vide
Meicen non
rectangulaires**



**Masque ouvert en
forme de S Meicen
Violet Imrt**



**Masque à tête
ouverte en forme de
S Meicen Violet Pin-
Lock**



**Masque de tête en
forme de S violet
Meicen masque
thermoplastique de
radiothérapie allongé
de 5 cm**




**Thermoplastiques
mammaires et
pelviens Meicen
Violet**




**Thermoplastiques
violets de type E**




**Autres types de
masques**

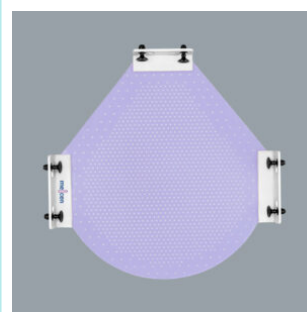


Masques de type V

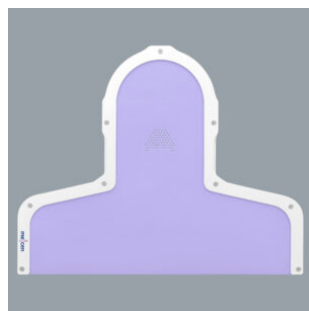


**Masques violets
thoraciques et
pelviens**

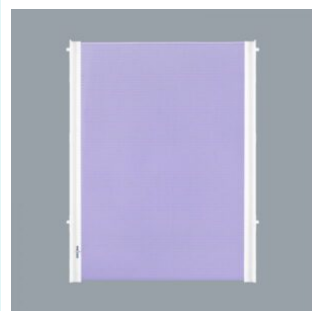


**Masques de type x-
Knife**

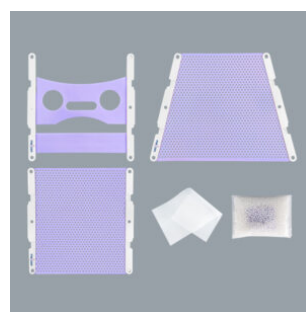

Masques de type P

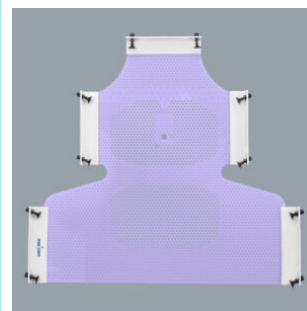

Masques de type L

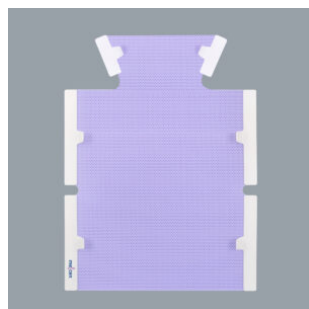


Masques de type S



Masques de type U




**Conseil de poitrine
Meicen MR-Supine**

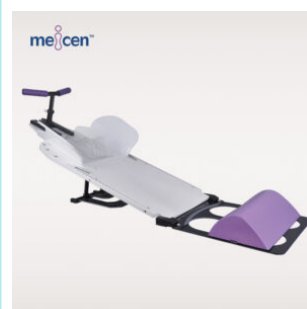

**Planche de poitrine
sujette Meicen**



**Plaque de base
Meicen Y-Series AIO**

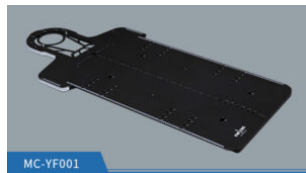

**Plaque de base
Meicen série P pour la
tête, les épaules et la
poitrine**



**Plaque de base
pelvienne Meicen
série C**



**Plaque de base
Meicen C-Series pour
la tête, les épaules et
la poitrine**



**Plaque de base
Meicen MR C-Series
AIO**



**Plaque de base
pelvienne Meicen
série A**




**Plaque de base
Meicen A-Series tête-
épaule-poitrine**



**Plaque de base AOI
Meicen série A**



**Plaques de base
Meicen série Y**

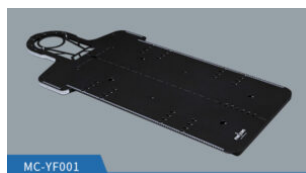

**Plaque de base
Meicen C-Series Aio
en fibre de carbone**



**Système
d'immobilisation SRS**



**Système
d'immobilisation
SBRT**



Meicen Barre de positionnement pour sac à vide Matière acrylique



Numéro de modèle : R-VLC02

Marque déposée : Renfu

Origine : Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine

Personnalisé : sur mesure

Certification : CE, FDA

Matériau : Fer

Adapté à : Adulte

Fonction : Systèmes de positionnement



Barre de verrouillage de la plaque de base pour le système Varian



Numéro de modèle : R-VLB01

Marque déposée : Renfu

Origine : Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine


Personnalisé : sur mesure

Certification : CE, FDA

Matière : Fer

Convient à : Adultes

Fonction : Systèmes de positionnement

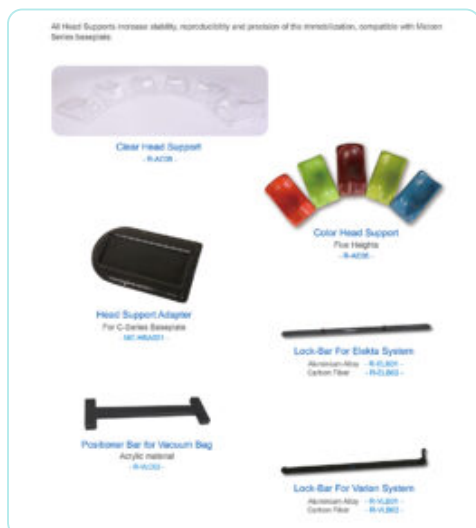

Barre de verrouillage de la plaque de base pour le système Elekta



Modèle NO.:R-ELB01

Marque déposée : Renfu

Origine:Guangzhou Chine

Personnalisé : Personnalisé : Personnalisé

Certification : CE, FDA

Matériau : Fer

Adapté à : Adultes

Fonction: Systèmes de positionnement



Coussin de tête Color Baseplate pour l'immobilisation en radiothérapie



Modèle NO.:R-AE05

Marque déposée : Renfu

Origine : Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine

Personnalisé : Sur mesure

Certification : CE, FDA

Convient pour : Adultes

Fonction : Systèmes de positionnement



Adaptateur de support de tête pour plaque de base Pour plaque de base de la série C



Modèle NO.:MC-HSA001

Marque déposée : Renfu

Origine:Guangzhou, Chine

Personnalisé : Personnalisé : Personnalisé

Certification : CE, FDA

Matériau : Fibre de carbone

Adapté à : Adultes

Fonction : Systèmes de positionnement



Coussin en fibre de carbone pour l'immobilisation en radiothérapie



Modèle NO.:R-CHS6

Marque déposée : Renfu

Origine : Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine Guangzhou, Chine

Certification : CE, FDA

Convient à : Adultes

Fonction : Systèmes de positionnement



Sacs d'aspirateur T-Shaped Meicen



Les sacs sous vide Meicen offrent aux patients un soutien ferme et stable. Ils sont protégés des déchirures et des taches par l'enveloppe NyLon enduite. Totalement imperméables à l'eau, aux fuites et à l'air, les sacs sous vide peuvent contenir des particules de densité alternative en polyamide. Des barres de verrouillage intégrées et des sacs sous vide de différentes formes et tailles sont disponibles.




Meicen Vacuum Bags

- ultra-durable, high-quality polyamide;
- Dark blue color distinguishable in optical imagers;
- MRSafe;
- Radio-translucent;
- Easy to clean;
- Cost-effective;
- Adapters are available for any manufacturer's pump.






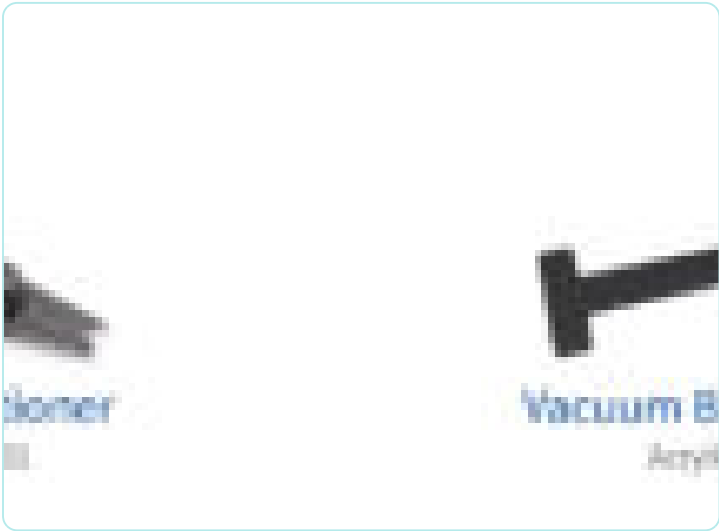




Les sacs sous vide Meicen offrent aux patients un soutien ferme et stable. Ils sont protégés des déchirures et des taches par l'enveloppe NyLon enduite. Totalement imperméables à l'eau, aux fuites et à l'air, les sacs sous vide peuvent contenir des particules de densité alternative en polyamide. Des barres de verrouillage intégrées et des sacs sous vide de différentes formes et tailles sont disponibles.

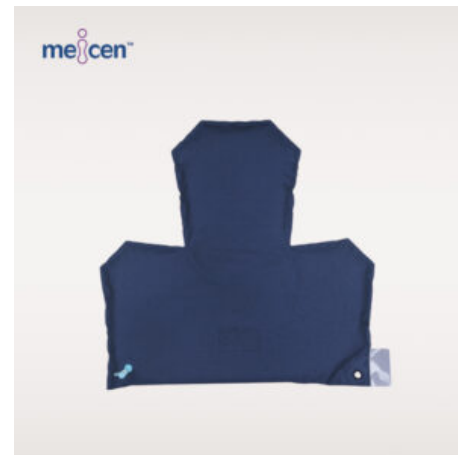

Sacs d'aspirateur Meicen

- Polyamide de haute qualité et ultra-durable ;
- Couleur bleu foncé reconnaissable par les imageurs optiques ;
- MRSafe ;
- Radio-translucide ;
- Facile à nettoyer ;
- Rentable ;
- Des adaptateurs sont disponibles pour les pompes de tous les fabricants.

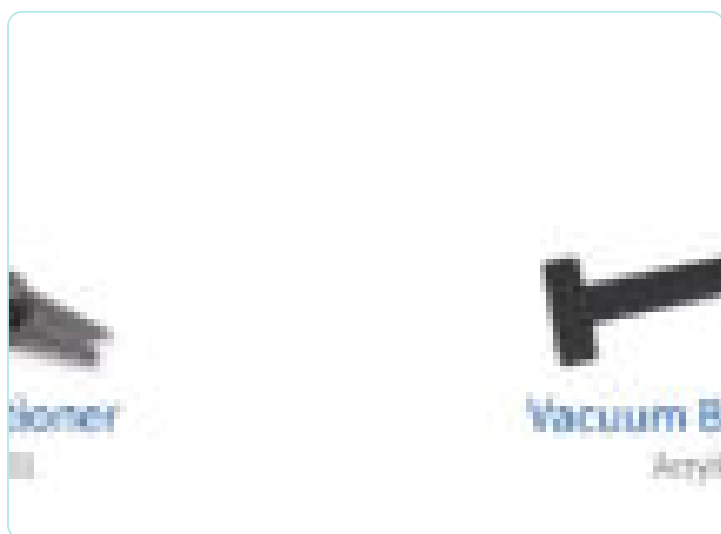

apter Type A

apter Type B with CPC





Sacs d'aspirateur rectangulaires indexés et non indexés de Meicen

Les sacs sous vide Meicen offrent aux patients un soutien ferme et stable. Ils sont protégés des déchirures et des taches par l'enveloppe NyLon enduite. Totalement imperméables à l'eau, aux fuites et à l'air, les sacs sous vide peuvent contenir des particules de densité alternative en polyamide. Des barres de verrouillage intégrées et des sacs sous vide de différentes formes et tailles sont disponibles.



Meicen Vacuum Bags

- ultra-durable, high-quality polyamide;
- Dark blue color distinguishable in optical imagers;
- MRSafe;
- Radio-translucent;
- Easy to clean;
- Cost-effective;
- Adapters are available for any manufacturer's pump.

Indexed Rectangular Vacuum Bags

R-E4430-TS-2	100cm x 70cm vacuum bag, 30L, indexed
R-E4401-TS-1	70cm x 70cm vacuum bag, 20L, indexed
R-E4532-TS-2	120cm x 80cm vacuum bag, 38L, indexed
R-E4439-TS-2	100cm x 75cm vacuum bag, 30L, indexed
R-E4530-TS-2	120cm x 75cm vacuum bag, 35L, indexed
R-E4543-TS-2	150cm x 75cm vacuum bag, 45L, indexed



Non-Indexed Rectangular Vacuum Bags

R-E4430-TS	100cm x 70cm vacuum bag, 30L
R-E4401-TS	70cm x 70cm vacuum bag, 20L
R-E4532-TS	120cm x 80cm vacuum bag, 38L
R-E4439-TS	100cm x 75cm vacuum bag, 30L
R-E4530-TS	120cm x 75cm vacuum bag, 35L
R-E4543-TS	150cm x 75cm vacuum bag, 45L



ster Type A

ster Type B with CPC







Les sacs sous vide Meicen offrent aux patients un soutien ferme et stable. Ils sont protégés contre les déchirures et les taches grâce à la coque en Nylon enduit. Les sacs sous vide sont totalement étanches, étanches et hermétiques et peuvent contenir des particules de densité alternative en polyamide. Les barres de verrouillage intégrées et les sacs sous vide sont disponibles en différentes formes et tailles.



Sacs sous vide Meicen

- polyamide ultra résistant et de haute qualité ;
- Couleur bleu foncé reconnaissable dans les imageurs optiques ;
- MRSafe ;
- Radio-translucide ;
- Facile à nettoyer;
- Rentable;
- Des adaptateurs sont disponibles pour la pompe de n'importe quel fabricant.

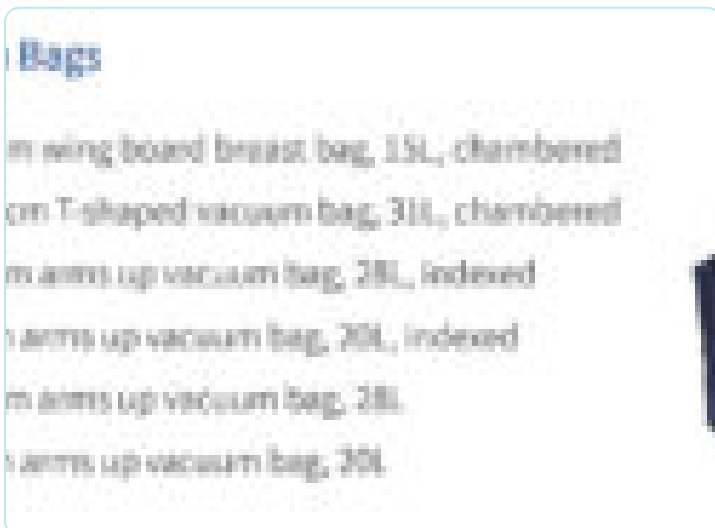

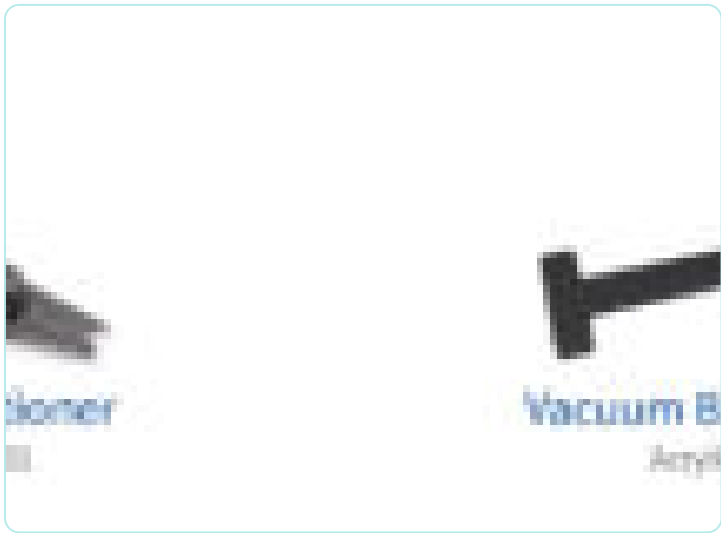

Masque ouvert en forme de S Meicen Violet Imrt



Numéro de modèle : RF-C101P-2004W

Marque déposée : Meicen

Type : Radiothérapie

Matériel: PCL

Certifications : CE, FDA

Origine : Canton, Chine

Convient pour : Adultes



Thermoplastiques violets Meicen de type S

Modèle : RF-C101P-2004W Épaisseur : 2,4 mm

Modèle : RF-C101P-2004W Épaisseur : 3,0 mm

Face ouverte renforcée, Pin-Lock

Thermoplastiques Meicen Violet

Les thermoplastiques Meicen Violet ont une surface antiadhésive, un taux de retrait très faible et sont constitués d'une toute nouvelle substance thermoplastique de qualité supérieure qui a été scientifiquement conçue pour un temps de moulage optimal et un confort optimal pour le patient. Tout au long du processus, notre objectif est d'offrir aux patients une excellente expérience. Pour satisfaire aux exigences de compatibilité des plaques de base de différents fabricants, des conceptions spéciales sont disponibles sur demande.



Masque à tête ouverte en forme de S Meicen Violet Pin-Lock



Numéro de modèle : RF-C101P-2007W

Marque déposée : Meicen

Type : Radiothérapie

Matériel: PCL

Certifications : CE, FDA

Origine : Canton, Chine

Convient pour : Adultes



Thermoplastiques violets Meicen de type S

Modèle : RF-C101P-2007W Épaisseur : 2,4 mm

Modèle : RF-C101P-3007W Épaisseur : 3,0 mm

Thermoplastiques violets Meicen

Les thermoplastiques Meicen Violet ont une surface antiadhésive, un taux de retrait très faible et sont constitués d'une toute nouvelle substance thermoplastique de première qualité qui a été scientifiquement conçue pour un temps de moulage optimal et un confort optimal du patient. Tout au long du processus, notre objectif est d'offrir aux patients une excellente expérience. Pour répondre aux exigences de compatibilité des plaques de base de différents fabricants, des conceptions spéciales sont disponibles sur demande.





Masque de tête en forme de S violet Meicen masque thermoplastique de radiothérapie allongé de 5 cm

Numéro de modèle : RF-C101P-2501W

Marque déposée : Meicen

Type : Radiothérapie

Matériau : PCL

Certifications : CE, FDA

Origine : Canton, Chine

Convient pour : Adultes



Thermoplastiques violets Meicen Type S

Modèle : RF-C101P-2501W Épaisseur : 2,4 mm

Modèle : RF-C101P-3501W Épaisseur : 3,0 mm

Perforation : 22 %, Pin-Lock

Thermoplastiques violets Meicen

Les thermoplastiques Meicen Violet ont une surface antiadhésive, un taux de retrait très faible et sont constitués d'une toute nouvelle substance thermoplastique de première qualité qui a été scientifiquement conçue pour un temps de moulage optimal et un confort optimal du patient. Tout au long du processus, notre objectif est d'offrir aux patients une excellente expérience. Pour répondre aux exigences de compatibilité des plaques de base de différents fabricants, des conceptions spéciales sont disponibles sur demande.




- Low shrinkage
- Low shrinkage
- Optimal mold
- Non-stick
- Violet color to


Thermoplastiques mammaires et pelviens Meicen Violet



Le masque thermoplastique violet Meicen est un tout nouveau masque haut de gamme pour le placement et l'immobilisation du patient pendant la radiothérapie.

Tous les supports de serrage courants des séries C et B de Meicen, ainsi que ceux d'autres fabricants, s'adaptent aux thermoplastiques mammaires et pelviens violets Meicen.

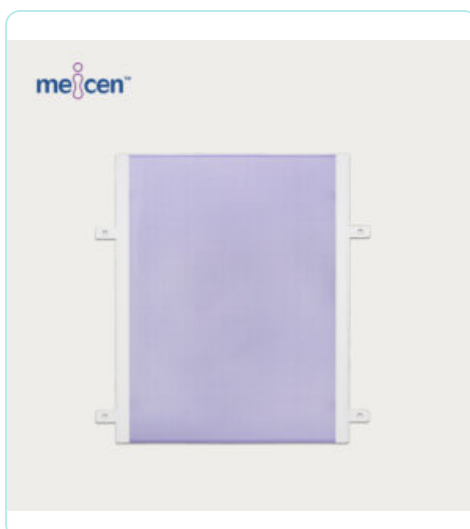

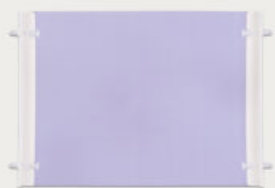

Thermoplastiques violets de type E



Les thermoplastiques Meicen Violet ont une surface antiadhésive, un taux de retrait très faible et sont constitués d'une toute nouvelle substance thermoplastique de première qualité qui a été scientifiquement conçue pour un temps de moulage optimal et un confort optimal du patient. Tout au long du processus, notre objectif est d'offrir aux patients une excellente expérience. Pour répondre aux exigences de compatibilité des plaques de base de différents fabricants, des conceptions spéciales sont disponibles sur demande.





Autres types de masques



Les masques ont de meilleures capacités d'immobilisation et de mise en forme, et leur surface n'est pas collante. Différents modèles et tailles de perforations sont disponibles pour répondre à vos besoins.

- Compatible avec les systèmes Elekta Gamma Knife® Icon™, Fraxion™ et HeadStep & HipStep™
- Disponible avec une face ouverte et une conception renforcée
- Peut être réchauffé au bain-marie ou au four

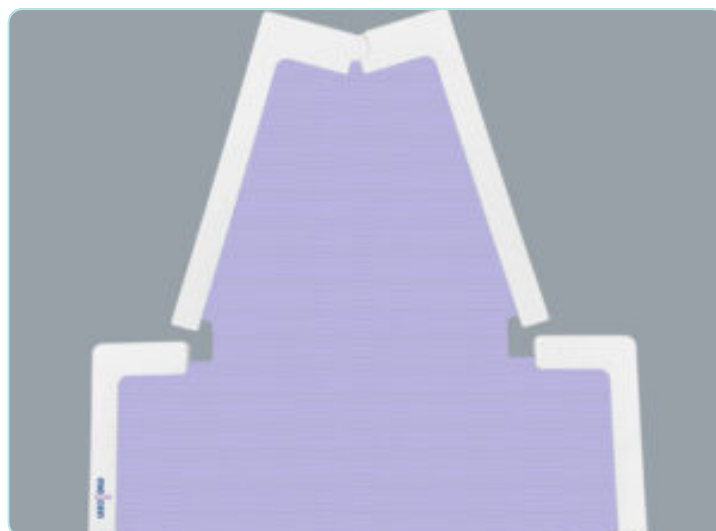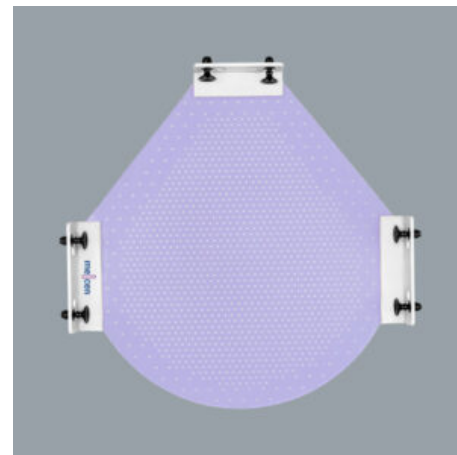




Masques de type V



Les masques violets en forme de V aident à réduire l'anxiété des patients. Selon vos demandes, des masques pour la tête seule, pour le décolleté et pour la tête et les épaules sont disponibles. Les broches sont silencieuses, sécurisées et simples à insérer et à retirer de notre cadre, qui présente une conception émarginée pour un retrait sans effort. Pour vos besoins, des épaisseurs de masque de 2,4 et 3,0 mm sont disponibles.

- Compatible avec le système Bionix VersaBoard
- Disponible avec une face ouverte et une conception renforcée
- Des masques pédiatriques sont disponibles
- Peut être chauffé au bain-marie ou au four

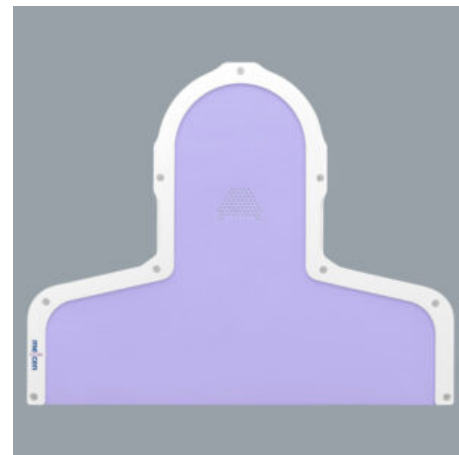

Masques violets thoraciques et pelviens



Les épingles sur les masques violets de poitrine et pelviens sont silencieuses, sécurisées et simples à mettre et à enlever. Le traitement des tumeurs du poumon, de l'œsophage et du sein est compatible avec le masque du cou, des épaules et du thorax. Différents modèles et tailles de perforations sont disponibles pour répondre à vos besoins.

- Compatible avec la plaque de base Meicen série C
- Des conceptions renforcées sont disponibles
- Peut être réchauffé au bain-marie ou au four




Masques de type x-Knife



Les masques Meicen X-Knife Violet sont fabriqués à partir d'un tout nouveau matériau thermoplastique de haute qualité créé spécifiquement pour offrir le meilleur confort possible au patient grâce à sa rigidité remarquable et son retrait incroyablement minimal.

La surface du masque face au patient des masques Meicen X-Knife Violet a un revêtement non collant, empêchant les masques de coller aux cheveux, à la barbe, etc. du patient.

- Compatible avec le système Brainlab
- Couches adhésives
- Facile à manipuler et à façonner



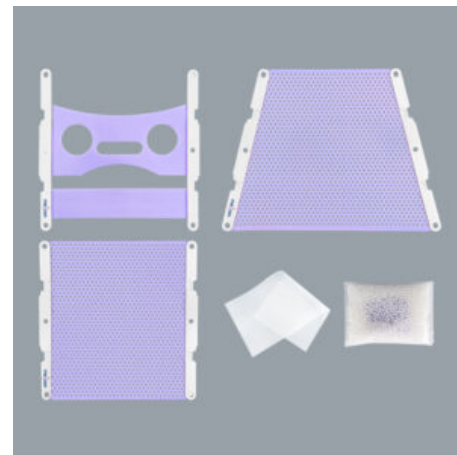


Masques de type P



Violet Type P. Les capacités améliorées d'immobilisation et de mise en forme rendent les masques moins collants à l'extérieur. Différents modèles et tailles de perforations sont disponibles pour répondre à vos besoins. Pour vos besoins, des épaisseurs de masque de 2,4 et 3,0 mm sont disponibles.

- broches de fixation robustes
- compatible avec les plaques de base de CIVCO, Meicen P-Series et d'autres fabricants
- accessible avec une construction renforcée et une face ouverte
- Peut être chauffé au bain-marie ou au four

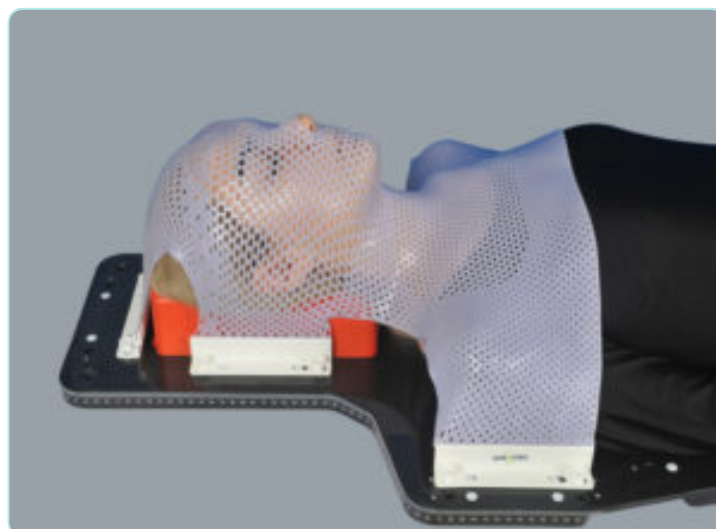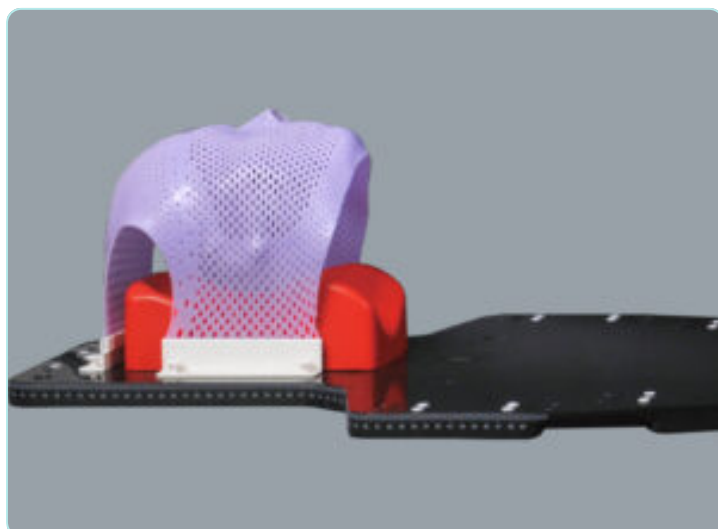
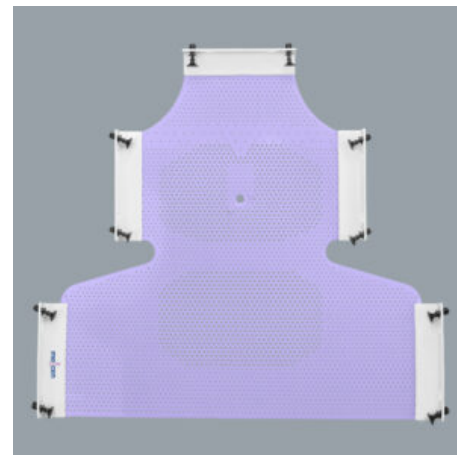


Masques de type L



L-Style Violet Les capacités améliorées d'immobilisation et de mise en forme rendent les masques moins collants à l'extérieur. Différents modèles et tailles de perforations sont disponibles pour répondre à vos besoins. Pour vos besoins, des épaisseurs de masque de 2,4 et 3,0 mm sont disponibles.

- Il est plus simple de mettre et d'enlever les pinces à poignée
- compatible avec les plaques de base de Meicen A-Series, Orfit et d'autres fabricants
- accessible avec une construction renforcée et une face ouverte
- Peut être chauffé au bain-marie ou au four

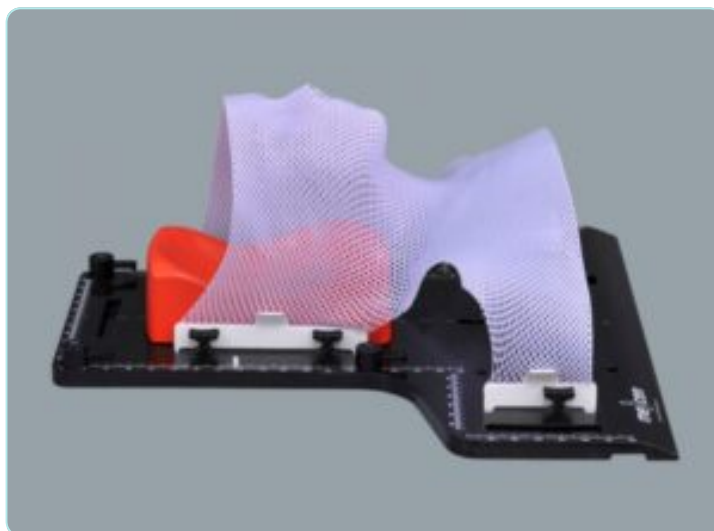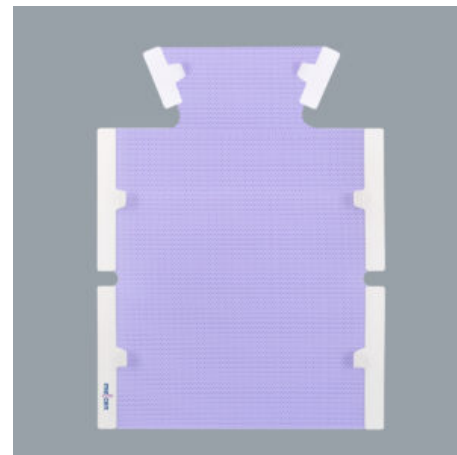

Masques de type S



Les masques violets de type S aident à réduire l'anxiété des patients. Selon vos demandes, il existe des masques pour la tête seule, la tête étendue (5 ou 9 cm), et la tête et les épaules. Les broches sont silencieuses, sécurisées et simples à insérer et à retirer de notre cadre, qui présente une conception émarginée pour un retrait sans effort. Pour vos besoins, des épaisseurs de masque de 2,4 et 3,0 mm sont disponibles.

- Compatible avec les bases Meicen C-Series et Y-Series, ainsi qu'avec toutes les bases courantes de type S
- Des masques pédiatriques sont offerts
- Une face ouverte et une construction renforcée sont disponibles
- Peut être chauffé au bain-marie ou au four



Masques de type U



Les masques violets U-Frame sont disponibles en deux options de monture : régulière et fine. Pour les patients ayant une tête plus grande, la monture fine offre une zone faciale plus large. Pour vos besoins, des épaisseurs de masque de 2,4 et 3,0 mm sont disponibles. Il peut être rallongé de 5 ou 9 centimètres pour augmenter la force d'immobilisation.

- Convient aux plaques de base Meicen U-Frame et à toutes les plaques de base U-Frame conventionnelles
- Accessible avec une construction renforcée et une face ouverte
- Peut être chauffé au bain-marie ou au four





Tableau thoracique Meicen en décubitus dorsal (compatible IRM) :

Une configuration économique et légère conçue pour un positionnement rapide, facile et réussi du patient. Le Breastboard offre une zone de traitement IGRT avec une atténuation minimale et une cohérence et une stabilité maximales grâce à l'utilisation d'une zone de traitement en fibre de verre sans noyau.


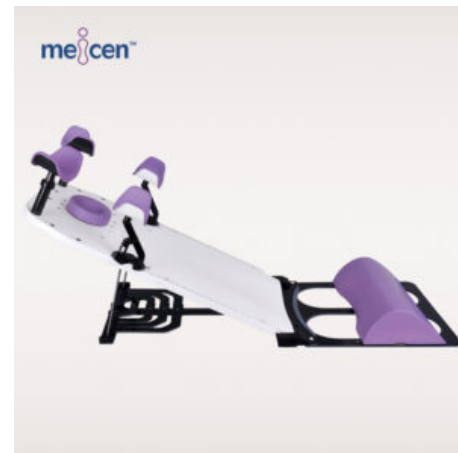


Tableau thoracique Meicen en décubitus dorsal compatible avec l'IRM :

- Entièrement évolutif pour s'adapter à différentes statures et dimensions ;
- Paramètres faciles à personnaliser pour le dégagement et le confort du patient ;
- Butée inférieure renforcée facile à verrouiller et zone lombaire profilée ;
- Admet à des traitements supraclaviculaires réguliers et répétables à l'aide d'un masque facial de type S ;
- Accepte les implants mammaires thermoplastiques.

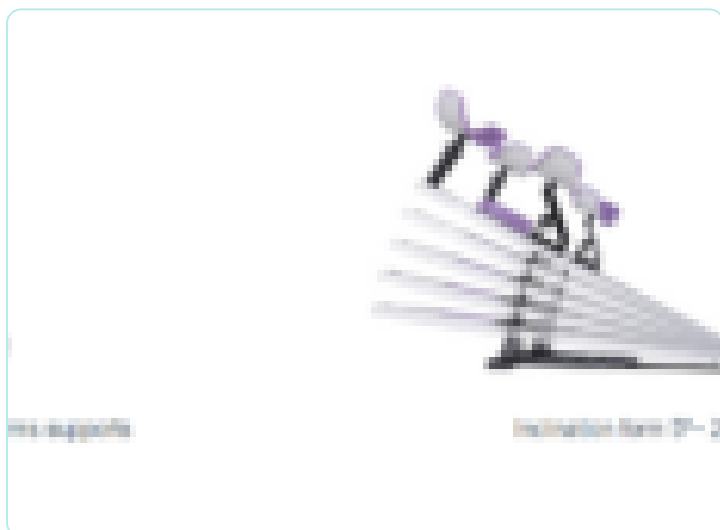

Meicen MR-Supine Breast Board Plus

- Modèle : MC-RX002
- Taille : 1325 (longueur) x 445 (largeur) mm



Meicen MR-Supine Breast Board Pro

- Modèle : MC-RX002
- Taille : 1 325 (longueur) x 445 (largeur) mm

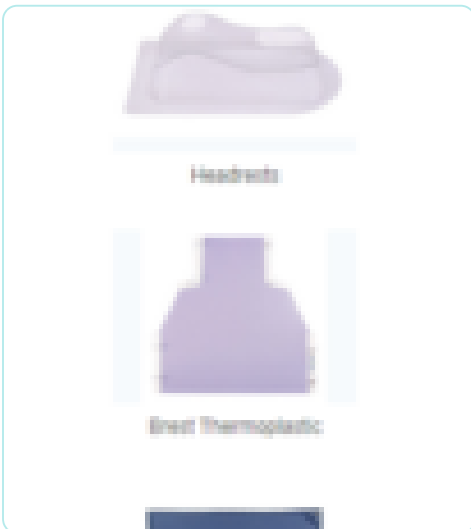


Planche de poitrine sujette Meicen



L'immobilisation par Meicen Prone Breast Board est une méthode simple, agréable et reproductible. Il est particulièrement amélioré des manières suivantes :

- Une section mammaire réversible permet le traitement de l'un ou l'autre sein.
- Les ouvertures à ouverture variable s'adaptent à différentes tailles de poitrine.
- Plusieurs tailles de cales hétérolatérales facilitent l'inclinaison du patient.
- Un coussin facial réglable de type massage est fourni.
- Les règles d'échelle facilitent la vérification des positions longitudinales et latérales du patient.



Replaceable Components



Plaque de base Meicen Y-Series AIO




La plaque de base Meicen Y-Series AIO présente une conception à verrouillage par broche pour une utilisation simple et offre une solution de positionnement personnalisable pour l'insertion de la tête, des épaules, du bassin et de tout le corps. Il convient à tous les masques à broches thermoplastiques de type S et Meicen. La plaque de base indexe les appuis-tête à l'aide de broches Silverman classiques. La plaque de base est conçue pour s'adapter aux patients adultes et pédiatriques. Il est compatible avec le support de bras R-CFA02, les coussins de positionnement des jambes et le berceau SRS MC-CR001. Il comprend également un verrou à rainure en option pour les masques de coffre.


La plaque de base Meicen Y-Series AIO est une plaque de base abordable, simple et utile. Il peut être combiné avec un pont ventral, un pont pour genoux et des coussins de positionnement pour les jambes pour créer un système de positionnement SBRT.

Caractéristiques:

- Conception profilée pour le confort du patient
- Compatible avec les masques de type S aux épaules étroites
- Configuré pour plusieurs traitements

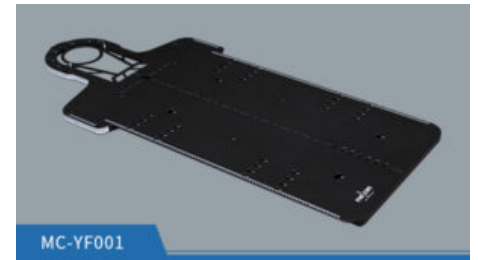

Recommended Solution

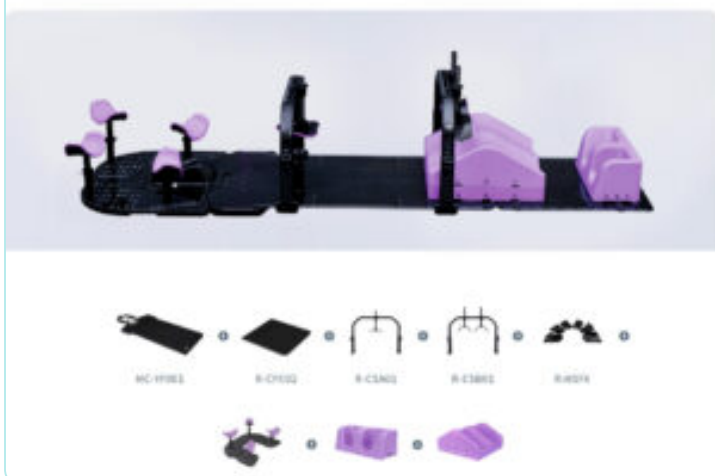



Plaque de base Meicen série P pour la tête, les épaules et la poitrine



Les thermoplastiques Meicen Type P sont compatibles avec les plaques de base Meicen P-Series pour la tête, les épaules et la poitrine. La plaque de base peut être utilisée pour immobiliser la tête, le cou, l'épaule et le thorax et est personnalisée pour de nombreux traitements. Il existe également une version étendue disponible pour le traitement de tout le corps.



Model: MC-PF002

Meicen P-Series Head & Shoulder & Breast Baseplate:
1000 (Length) x 550 (Width) / mm



Headrests



Vacuum Bags

Plaque de base pelvienne Meicen série C



La plaque de base pelvienne Meicen C-Series est un dispositif de type lame multi-traitement qui peut être utilisé pour immobiliser le bassin en préparation à la radiothérapie.



Plaque de base pelvienne Meicen C-Series (fibre de carbone) :

- Conception profilée améliorant le confort
- Échelle réglable pour différentes largeurs de corps
- Verrouillage de rainure intégré pour un meilleur alignement
- Combiné avec des sacs sous vide et des masques pour un positionnement précis

Modèle : MC-CF003 (avec option de sécurité IRM)

Dimensions : 850 x 575 mm en longueur et largeur





Plaque de base Meicen C-Series pour la tête, les épaules et la poitrine

Les plaques de base Meicen C-Series sont des éléments de type coulissant qui peuvent être utilisés à la fois pour l'irradiation ciblée et pour l'ensemble du corps. Ils sont conçus pour de nombreux traitements et peuvent être utilisés pour immobiliser la tête, le cou, les épaules, le thorax et le bassin.



Plaque de base Meicen C-Series pour la tête, les épaules et les seins

- évolutif pour s'adapter à différentes tailles de corps
- Marge latérale pour une manipulation et une installation faciles
- Adapté à une variété de thérapies
- Convient à tous les masques thermoplastiques et sacs sous vide de type S
- Il existe une option sans danger pour l'IRM

Modèle : MC-CF002

Taille : 1000 (longueur) x 606 (largeur)/mm





Plaque de base Meicen MR C-Series AIO




Toutes les plaques de base de la série Meicen sont compatibles IRM et fabriquées en fibre de verre robuste, garantissant dureté et confort d'utilisation. Contactez-nous pour plus d'informations sur les plaques de base compatibles IRM.



Modèle : MC-MRC01

Taille : 1300 (longueur) x 606 (largeur) mm

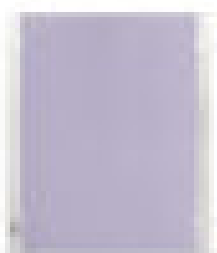

Trunk Mask



PVC Clear Headrest

Plaquette de base pelvienne Meicen série A



Notre produit de type coulissant, la plaque de base pelvienne Meicen A-Series, peut être utilisée pour immobiliser le bassin pour la radiothérapie et est configurée pour divers traitements.



Plaquette de base pelvienne série A (avec une option pour la sécurité IRM)

- Forme profilée pour le confort du patient
- Balance pouvant être ajustée pour s'adapter à différentes tailles de corps
- Côtés et marges pour un transport et un assemblage faciles
- Des options de sacs sous vide et de masques thermoplastiques sont proposées

Le modèle MC-AF003



Plaque de base Meicen A-Series tête-épaule-poitrine



Les plaques de base Meicen A-Series sont des éléments de type coulissant qui peuvent être utilisés pour l'immobilisation par rayonnement de la tête, du cou et des épaules. Ils sont configurés pour de nombreux traitements.



Plaque de base série A pour la tête, les épaules et les seins (variante compatible IRM disponible)

- Confort du patient grâce à une conception simplifiée
- Écailles modifiables pour s'adapter à différentes formes de corps
- Côtés et marges pour une manipulation et un assemblage faciles
- Des options de sacs sous vide et de masques thermoplastiques sont proposées

Le modèle MC-AF002



Plaque de base AOI Meicen série A



Les plaques de base Meicen A-Series sont des éléments de type coulissant qui peuvent être utilisés à la fois pour l'irradiation ciblée et pour l'ensemble du corps. Ils sont conçus pour de nombreux traitements et peuvent être utilisés pour immobiliser la tête, le cou, les épaules, le thorax et le bassin.



Plaque de base en fibre de carbone Aio série A (disponible avec l'option de sécurité IRM)

- Forme profilée pour le confort du patient
- Échelle qui peut être ajustée pour s'adapter à une gamme de tailles de corps
- Côtés et marges pour un transport et une installation faciles
- Une sélection de sacs sous vide et de masques thermoplastiques.

Le modèle MC-AF001



Plaques de base Meicen série Y




Avec sa conception à verrouillage par goupille pour une utilisation simple, la plaque de base Meicen Y-Series AIO offre une option de montage flexible pour une installation sur la tête, les épaules, le bassin et sur tout le corps. Tous les masques à broches thermoplastiques Type S et Meicen sont compatibles avec celui-ci. Des broches Silverman standard sont utilisées par la plaque de base pour l'indexation de l'appui-tête. Pour les patients adultes et pédiatriques, la plaque de base a deux configurations. Il peut fonctionner avec le SRS Cradle MC-CR001, les coussins de positionnement des jambes et le support de bras supérieur R-CFA02. Pour les masques de coffre, un verrou à rainure en option est inclus.


La plaque de base Meicen Y-Series AIO est une plaque de base simple, abordable et utile. Pour créer une solution de positionnement SBRT, il peut être combiné avec des coussins de positionnement des jambes, un pont pour genoux et un pont ventral.

Qualités:

- Configuré pour de nombreux traitements ;
- Compatible avec les masques de type S aux épaules étroites ;
- Conception confortable et profilée pour les patients.

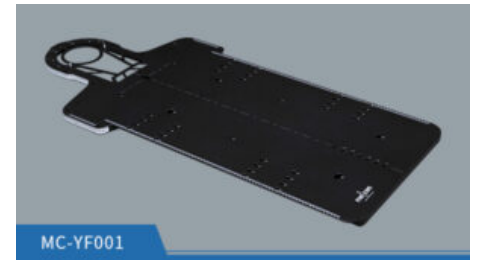

Recommended Solution

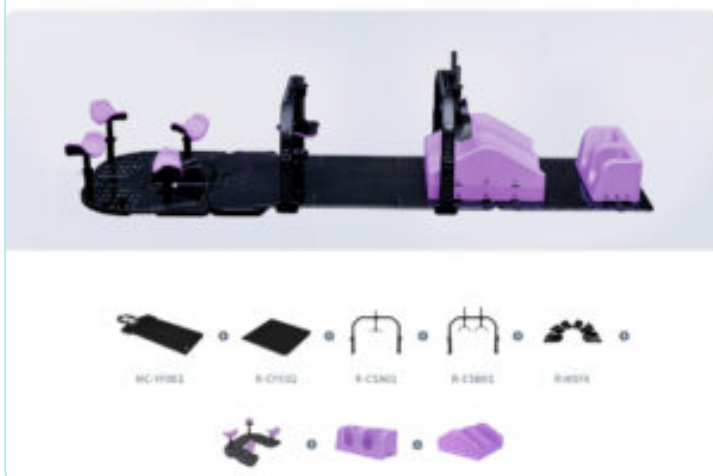

Plaque de base Meicen C-Series Aio en fibre de carbone



Les plaques de base Meicen C-Series sont des éléments de type coulissant qui peuvent être utilisés à la fois pour l'irradiation ciblée et pour l'ensemble du corps. Ils sont conçus pour de nombreux traitements et peuvent être utilisés pour immobiliser la tête, le cou, les épaules, le thorax et le bassin.



Plaque de base Meicen AIO, série C

- Une échelle réglable pour différentes largeurs de corps
- Côtés marginaux pour un transport et une installation faciles
- Mise en place des différents soins
- Compatibilité : Tous les masques thermoplastiques et sacs sous vide de type S

Le modèle MC-CF001

Taille : 1300 mm de long sur 606 mm de large





Système d'immobilisation SRS



L'ensemble masque SRS, l'appui-tête élastique et le berceau SRS constituent le système d'immobilisation Meicen SRS. Chez les patients subissant une radiochirurgie stéréotaxique pour un cancer de la tête, elle peut répondre plus efficacement aux exigences cliniques de fixation et de postures corporelles précises.


Qualités:

- Conception évidée et simplifiée pour réduire le blocage des rayons ;
- La solidité et la durabilité sont assurées par l'intégration ;
- Petit et léger, le ranger est simple ;
- Grande adaptabilité, adaptée à une gamme de plaques de base.



Un ensemble de masques SRS puissant et bien ajusté est inclus avec le système Meicen SRS. Une fixation plus précise est rendue possible par les doubles couches supérieure et inférieure. Ensemble, l'ensemble de masques SRS et l'appui-tête élastique peuvent aider les patients à obtenir un profil occipital plus personnalisé et une structure de soutien plus solide.


Recommended Solution

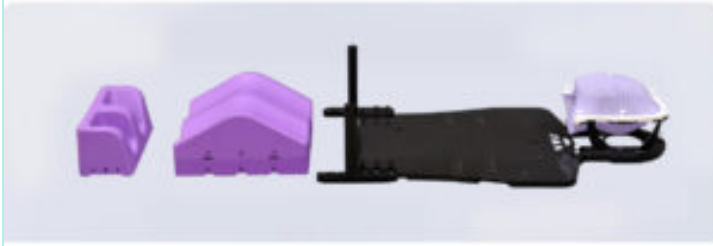

Système d'immobilisation SBRT



Le système Meicen SBRT est très précis, multifonctionnel et convivial pour les configurations de patients SBRT avec une faible atténuation des rayonnements. La plaque de base en fibre de carbone est adaptable au dessus de canapé de n'importe quel fabricant. La hauteur des ponts du ventre et des genoux peut être ajustée et verrouillée rapidement, et les ponts se verrouillent et se déverrouillent sans problème. Le système comprend un pont respiratoire réglable de taille unique pour s'adapter à tous les patients, construit en fibre de carbone pour minimiser les artefacts d'image et l'atténuation du faisceau.

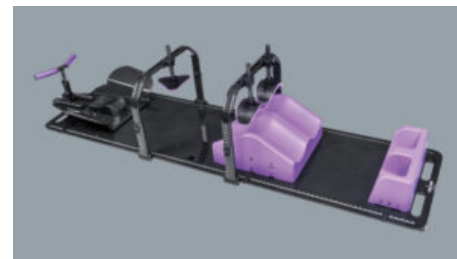

Composants inclus :

- Plaque de base 200x53cm

- Pont du ventre
- Pont du genou
- Poignée en T pour planche à ailes
- Coussin pour genoux et pieds
- Sac sous vide SBRT
- Un appui-tête
- Trois barres d'index SBRT
- Deux positionneurs de sacs sous vide